

—
마음잇다

AI 감성분석 기반 시니어 정서 변화 모니터링 서비스

화면설계서

2026. 08. 28

팀명 : 마음잇다
팀원 : 박해성 / 김동희 / 김재부 / 정현우


변경이력

버전	작성일자	수정사항	작성자	검수자
0.1	2026.07.21	- 로그인/시니어 화면 설계 1차 배포	박해성	박해성
0.2	2026.07.28	- 메뉴 구성, 플로우 차트, 시니어/보호자 화면 설계 수정	박해성	박해성
0.3	2026.08.03	- 메뉴 구성 및 전체 화면 수정	박해성	박해성

작성방법)


1. 화면설계서가 수정될 때마다 버전, 작성자, 수정사항, 수정날짜를 작성하여 이력을 작성해야 한다.
2. 버전은 화면설계서가 수정될 때마다 작성해야 한다.
2. 수정사항은 과거버전 대비 어떠한 내용이 달라졌는지(추가/수정/삭제)를 작성해야 한다.
3. 작성자는 화면설계내용을 작성한 사람이다.
4. 검수자는 화면설계에 대해 문제가 없는지 점검하는 사람이다.
5. 현재 문서를 제출할 경우 현재 작성방법에 대한 내용은 모두 지우고 제출해야 한다.

메뉴 구성

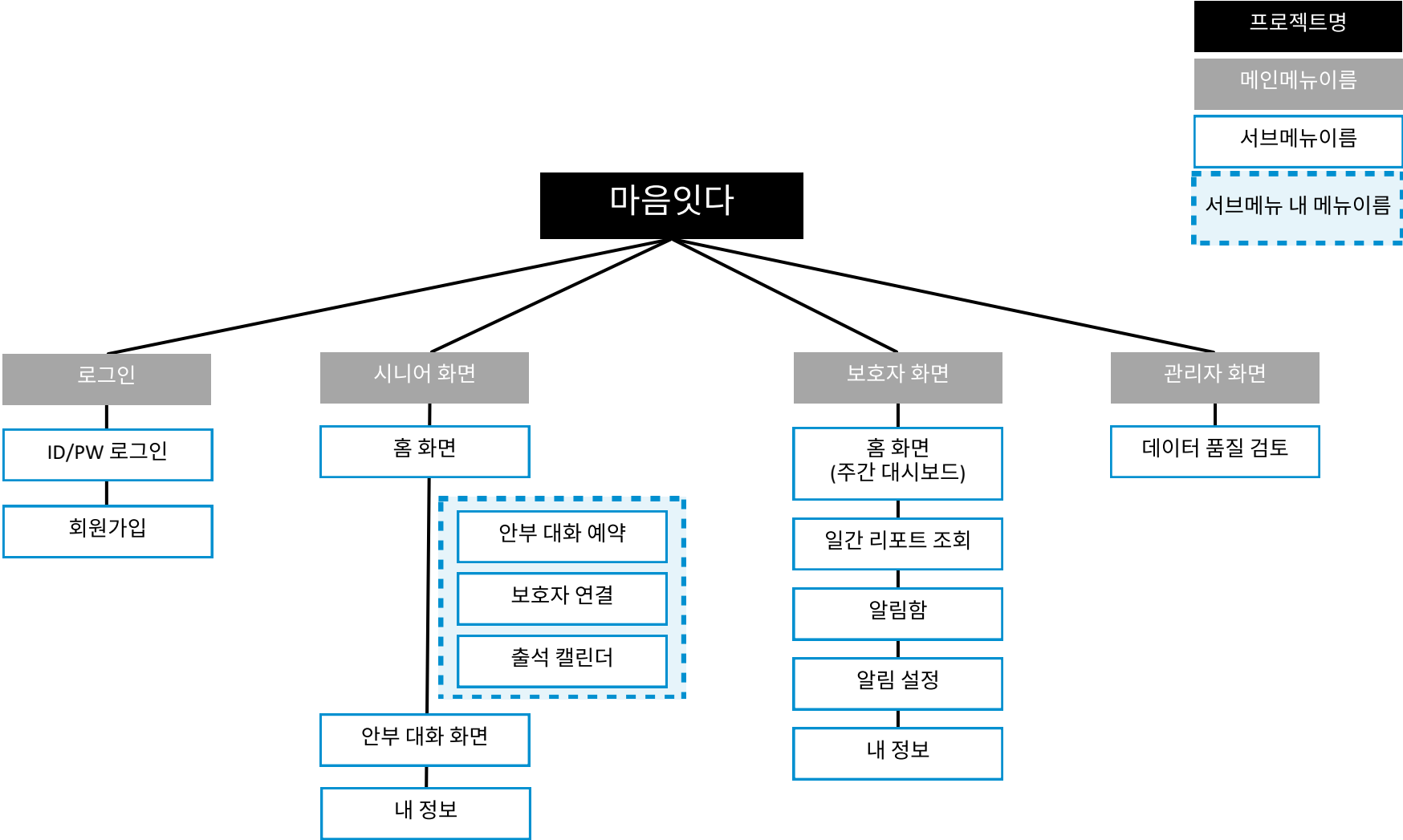

플로우 차트(안부대화/리포트조회)

안부 대화 (시니어)

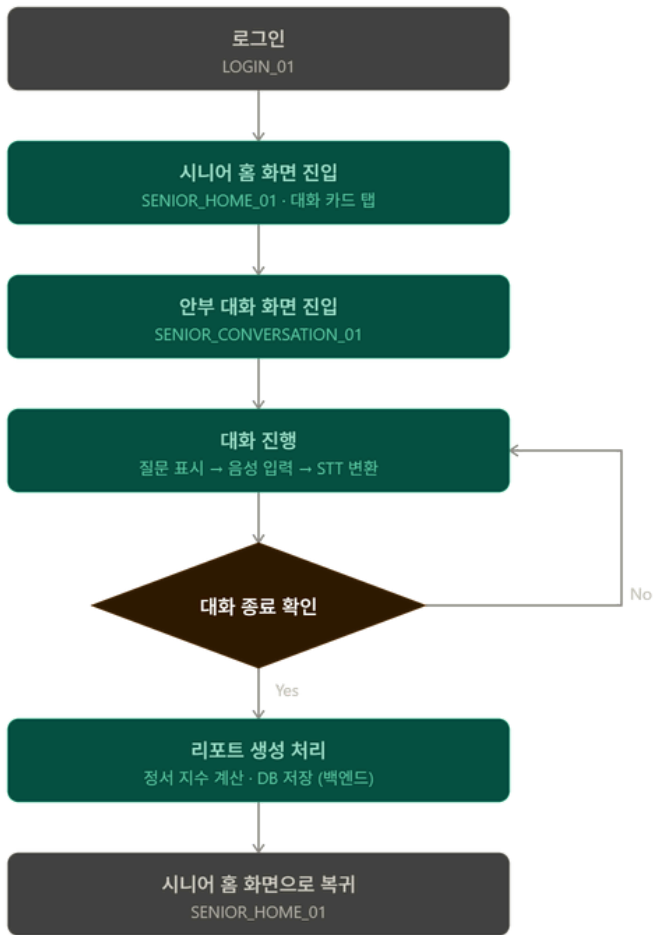

리포트 조회 (보호자)



화면 ID

LOGIN_01

화면이름

로그인 및 회원가입 안내

관련 유스케이스 ID

UC-01, UC-02

화면개요

사용자가 로그인 하거나 회원가입 화면으로 진입할 수 있는 화면

메뉴경로

로그인

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번에 아이디/비밀번호를 입력한다.
- 2번 체크 시, 다음 접속부터 자동으로 로그인된 상태로 진입한다 (역할별 메인 화면으로 바로 이동).
- 3번 클릭 시, 서버에 인증 요청을 보내고 성공하면 역할(시니어/보호자/관리자)에 따라 메인 화면으로 분기한다.
- 4번 클릭 시, 회원가입 화면으로 진입한다.

화면 ID

JOIN_01

화면이름

회원가입

관련 유스케이스 ID

UC-02

화면개요

신규 사용자가 서비스 이용 목적에 맞는 역할을 선택하고 회원가입하는 화면

메뉴경로

로그인 / 회원가입

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성

The screenshot shows a mobile app interface for membership registration. At the top, the status bar shows 9:41. The app bar has a back arrow and the text '회원가입'. Below the app bar, the text '어떤 역할로 가입하시나요?' is displayed. There are two selectable roles: '시니어' (Senior) with a green icon and '보호자' (Guardian) with a light orange icon. Below the roles, there are input fields for '아이디' (ID), '비밀번호 (8자 이상)' (Password), '비밀번호 확인' (Confirm Password), '이름' (Name), and '휴대폰 번호' (Phone Number). A green checkmark and the text '약관 전체 동의' (I agree to all terms) are shown. At the bottom, there is a large green button labeled '가입하기' (Sign Up). Red numbered callouts 1 through 4 highlight the role selection, input fields, terms agreement, and the sign-up button respectively.

9:41

< 회원가입

어떤 역할로 가입하시나요?

1

시니어
안부 대화를 해요

보호자
리포트를 받아요

2

아이디

중복 확인

비밀번호 (8자 이상)

비밀번호 확인

이름

휴대폰 번호

- 없이 입력

3

☒ 약관 전체 동의

☒ [필수] 서비스 이용약관 · 개인정보 처리방침 보기

4

가입하기

화면설명

- 1번: 사용자의 서비스 이용 목적에 따라 '시니어'와 '보호자' 역할중 선택할 수 있는 영역.
- 2번: 아이디, 비밀번호, 이름, 휴대폰번호를 입력하는 영역.
- 3번: 서비스 이용약관 동의 체크박스.
- 4번: 회원가입 완료 단계로 진입하는 버튼.

화면 ID

SENIOR_HOME_01

화면이름

시니어 - 홈 메인

관련 유스케이스 ID

UC-03, UC-04, UC-05

화면개요

시니어 사용자의 홈 화면으로 알림 설정, 대화 진입, 직전 대화 요약 확인, 보호자 연결 상태 확인, 출석 현황을 모니터링할 수 있는 화면

메뉴경로

로그인 성공 / 시니어 홈

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 안부 대화가 예정된 시간을 안내하며, 터치 시 예약 시간을 모달을 통해 변경할 수 있다.
- 2번: AI 캐릭터와 즉시 음성 대화를 시작할 수 있도록 유도하는 버튼.
- 3번: 직전에 진행한 안부 대화를 요약하여 보여준다.
- 4번: 현재 시니어 계정의 보호자 연결 상태를 보여준다.
- 5번: 요일별 안부 대화 완료 여부를 캐릭터 스탬프 형태로 표시하여 지속적인 참여를 유도하는 영역.
- 6번: 홈, 대화, 설정 화면으로 이동 가능한 하단 네비게이션 바.

화면 ID

SENIOR_LINK_01,
GUARDIAN_LINK_01

화면이름

시니어 - 보호자 연결 화면

관련 유스케이스 ID

UC-05, UC-10

화면개요


보호자가 시니어에게 연결 요청을 보내고, 시니어가 해당 요청을 수락 혹은 거절하는 화면

메뉴경로

로그인 성공 / 홈 / 연결 관리

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성

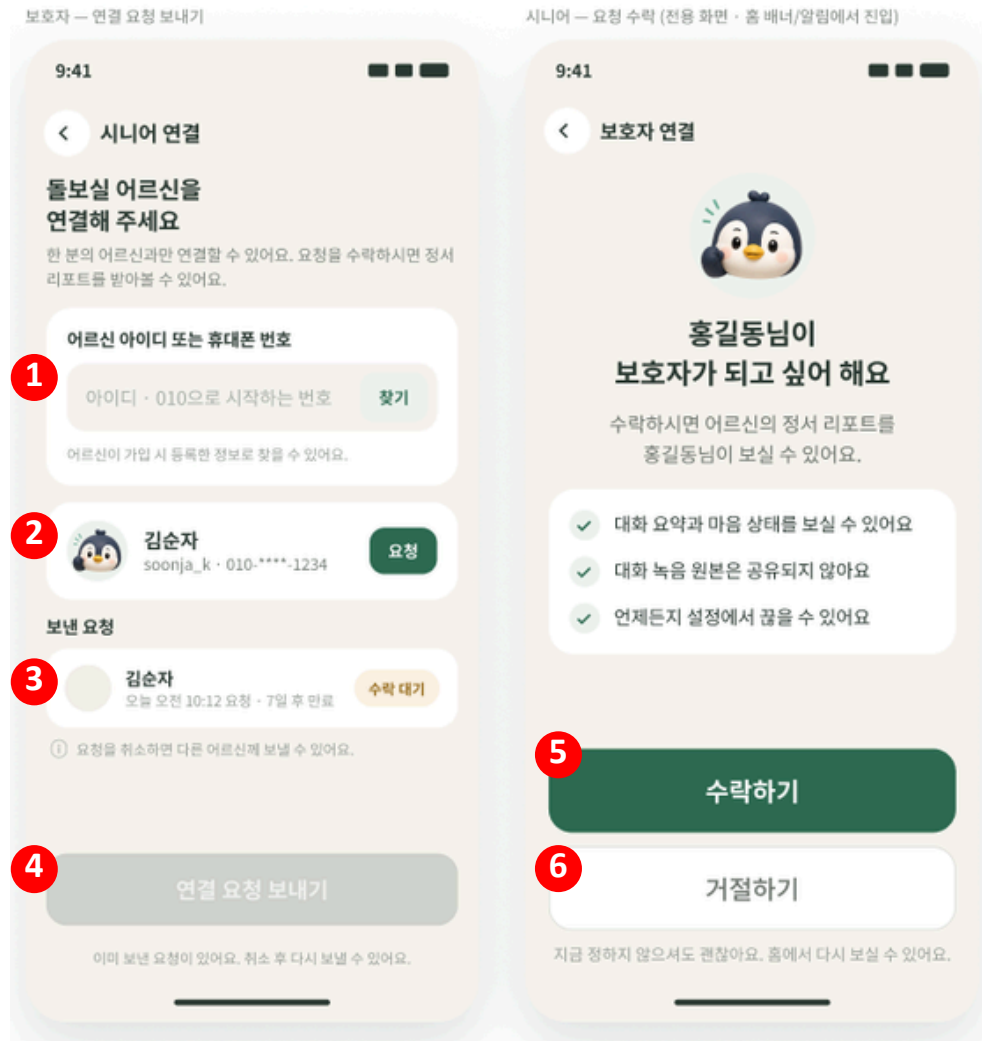

화면설명

- 1번: 연결 요청할 시니어 계정을 찾는 영역.
- 2번: 조회된 시니어 사용자를 표시한다.
- 3번: 이전에 보낸 연결 요청이 있다면 표시한다.
- 4번: 선택한 시니어 계정에 보호자 연결 요청을 보낸다.
- 5~6번: 시니어는 수신한 보호자 연결 요청을 수락하거나 거절할 수 있다.

화면 ID

SENIOR_CONVERSATION_01

화면이름

시니어 - 안부 대화 화면

관련 유스케이스 ID

UC-03, UC-06

화면개요


음성으로 AI와 대화할 수 있는 화면

메뉴경로

로그인 성공 / 시니어 홈 / 안부 대화

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성

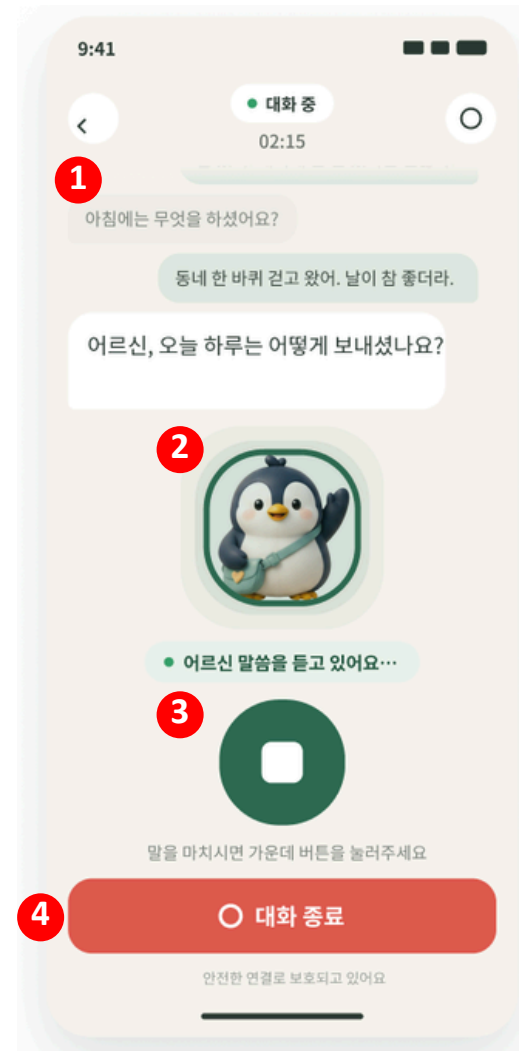

화면설명

- 1번: 챗봇의 질문과 시니어의 응답이 말풍선으로 표시되는 영역
- 2번: 응답 대기, 분석, 음성 출력 등 상태에 따라 다른 행동의 캐릭터를 표시한다.
- 3번: 시니어가 대답을 마친 후에 자동 녹음 종료를 기다리지 않고 수동으로 직접 제어할 수 있다.
- 4번: 버튼을 누르면 안부 대화를 종료할 수 있다.

화면 ID

GUARDIAN_HOME_01

화면이름

보호자 - 홈 메인

관련 유스케이스 ID

UC-08

화면개요

보호자가 시니어 사용자의 주간 상태와 통계를 한눈에 모니터링하는 홈 화면

메뉴경로

로그인/보호자홈

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성



화면설명

- 1번: 시니어의 오늘 안부 대화 여부와 분석 요약 상태를 표시하는 영역
- 2번: 최근 7일의 시니어 정서 지수 변화 추이를 한눈에 파악할 수 있는 그래프
- 3번: 최근 7일의 정서 지수 평균, 최고, 최저점을 각각 요약하여 보여주는 데이터 카드
- 4번: 최근 7일의 정서 지수 변화 추이를 기반으로 보호자에게 추천 행동을 제시할 수 있다.
- 5번: 서비스 내 주요 메뉴(홈, 리포트, 알림, 내 정보)로 바로 이동할 수 있는 하단 네비게이션 바

화면 ID

GUARDIAN_REPORT_01

화면이름

보호자 - 일간 리포트 조회

관련 유스케이스 ID

UC-08, UC-09

화면개요


특정 날짜의 시니어 정서 상태, 대화 요약 및 실제 발화 내용을 상세하게 확인할 수 있는 일간 리포트 조회 화면

메뉴경로

로그인/보호자홈/리포트

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성

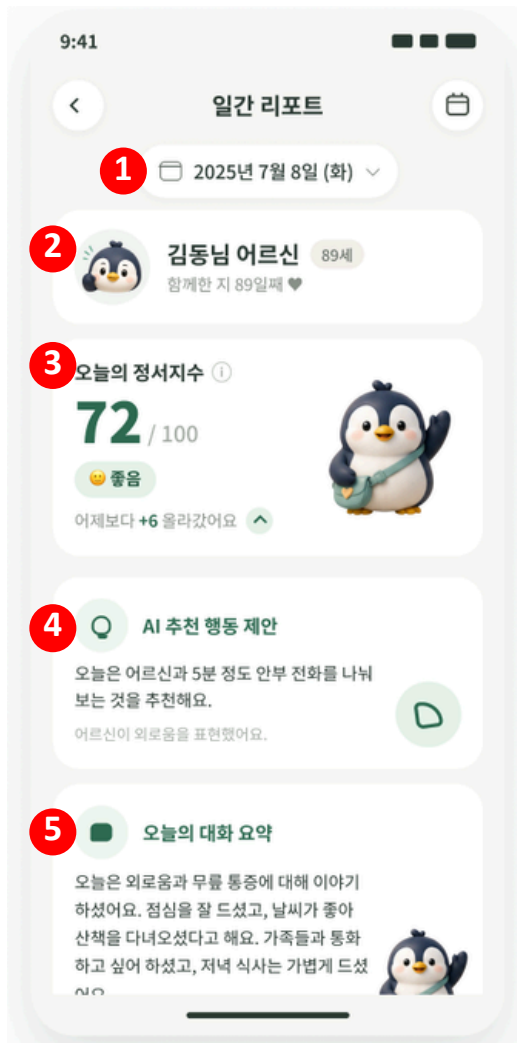

화면설명

- 1번: 조회 중인 리포트의 기준 날짜를 표시하며, 터치시 다른 날짜의 조회할 리포트를 선택할 수 있다.
- 2번: 리포트의 대상 시니어를 표시한다.
- 3번: 당일 측정된 최종 정서 지수를 표시하는 영역.
- 4번: 당일 시니어의 응답들을 기반으로 보호자가 실행하면 좋을 실천 지침을 AI가 제안한다.
- 5번: 당일 대화 데이터 중 핵심 주제와 문맥을 요약하여 보여준다.
- 6번: 정서 지수 산출에 근거가 된 문장들을 제시하는 영역으로, 5번 하단 영역에 위치한다.

화면 ID

GUARDIAN_NOTIFICATION_01

화면이름

보호자 - 알림함 화면

관련 유스케이스 ID

UC-11

화면개요


보호자가 수신한 알림 목록을 확인
및 읽음 처리하는 화면

메뉴경로

로그인/보호자홈/알림

작성자

팀장 - 박해성 / 팀원 - 박해성

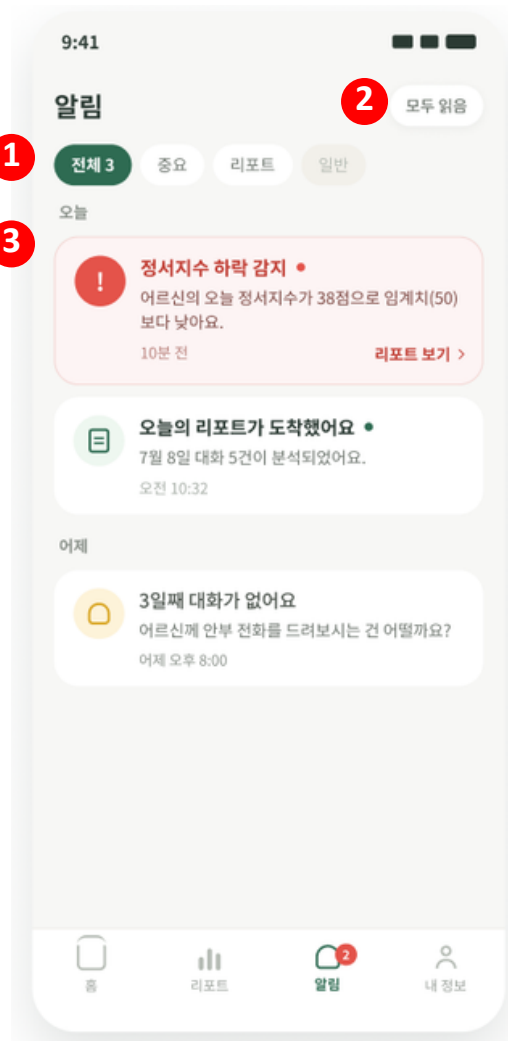

화면설명

- 1번: 확인할 알림 종류를 선택하는 영역.
- 2번: 전체 알림을 읽음 처리하는 버튼.
- 3번: 보호자가 수신한 알림 목록을 표시하는 영역.